





**КОНЦЕНТРАТ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА  
ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ**

**Дисплей Touch**

**ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ, ИНТУИТИВНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

## Панель врача



Панель врача обеспечивает максимальный комфорт и простоту использования, благодаря плавным движениям и оптимизированным размерам. Инструменты врача

в версии S.P.R.I.D.O. располагаются на автоклавируемом силиконовом коврик, в версии с нижней подачей инструмента размещаются в съемных и автоклавируемых держателях.



ИННОВАЦИОННАЯ, ИНТУИТИВНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, установка гарантирует оптимальное управление данными, параметрами и настройками благодаря бесчисленным возможностям настройки.

Большой 7-дюймовый цветной стеклянный экран и удобная графика позволяют быстро и легко управлять параметрами инструмента, функциями и перемещениями стоматологической установки, оптимизируя время работы и безопасность.

## Панель ассистента

Четкие линии с плавным закруглением и удобная эргономичная ручка делают обращение с панелью ассистента чрезвычайно простым. Панель ассистента установлена на двухшарнирном кронштейне и изготовлена из прочного, устойчивого к царапинам и химическому воздействию

материала. Панель ассистента оснащена дисплеем управления со стеклянной поверхностью с емкостной сенсорной технологией и рассчитана на размещение двух канюль для хирургической аспирации и двух вспомогательных инструментов.







1. ИНСТРУМЕНТ
2. ТИП НАКОНЕЧНИКА
3. РЕАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ МИКРОМОТОРА
4. ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
5. ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС
6. ВКЛ/ВЫКЛ СПРЕЯ

7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
  - Вызов ассистента/Открытие двери
  - Негативоскоп
  - Подача воды на плевательницу
  - Подача теплой воды на плевательницу
  - Подача холодной воды на плевательницу
  - Вкл./выкл. светильника врача

8. ПРОГРАММЫ ПАМЯТИ КРЕСЛА
9. МЕНЮ ПРОГРАММЫ
10. AUTO FORWARD - AUTO REVERSE
11. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
12. ФИБРООПТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА
13. РЕВЕРС МИКРОМОТОРА



### НАСТРОЙКИ

В этом меню вы можете установить индивидуальные параметры для пяти пользователей и изменить таймеры для различных функций.



### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

В секции ОБРАТНЫЙ СЧЕТ вы можете установить таймер обратного отсчета.



### СКАЛЕР

В специальном разделе SCALER вы можете:

- работать в режимах: Endo, Scaling, Perio;
- управлять потоком жидкости от перистальтического насоса;
- активировать пропорциональный режим



### ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ - ЭНДО - ХИРУРГИЯ

В хирургический пакет входят все инструменты, необходимые для безопасной и точной работы:

- Хирургический микромотор Bien Air MX2 с перистальтическим насосом и специальными



программами для установки, настройки и контроля параметров, необходимых для консервативных, эндодонтических и хирургических вмешательств. MX2 имеет регулируемый крутящий момент от 0,3 Нсм до более 70 Нсм в зависимости от выбранного



редукционного наконечника. Эндодонтические функции являются стандартными для MX2 и MCX от Bien Air. Функция круиз-контроля, специально разработанная Miglionic, позволяет вам управлять инструментом, не держа ногу на рычаге педали

# Гигиена



## СИСТЕМА MDS

СИСТЕМА MDS: автоматическая система дезинфекции водяного контура, предназначенная для смешивания водопроводной воды с дезинфицирующей жидкостью.

**Благодаря MDS** вода всегда поступает к наконечникам дезинфицированной, предотвращая образование известкового налета и биопленки, гарантируя чистоту водных коммуникаций и более длительный срок службы наконечников.

**СИСТЕМА MDS+:** в дополнение к базовому функционалу MDS по непрерывной дезинфекции водяных контуров модуля врача, предлагает возможность проведения интенсивной дезинфекции этих же водных коммуникаций и водно-воздушных коммуникаций наконечников, выполняемых между одним пациентом и другим. Когда система неактивна, MDS + работает как MDS.



Внутри гидроблока можно установить :

## СИСТЕМА ASB

**БУТЫЛКА ДЛЯ ПОДАЧИ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ:** Система, интегрированная в стоматологическую установку, которая обеспечивает возможность использования дистиллированной воды или воды с добавлением дезинфицирующего средства (WK от компании Metatys) путем забора воды из специальной бутылки емкостью 2 лт. как альтернатива водопроводной воде.



СЪЕМНАЯ И АВТОКЛАВИРУЕМАЯ РУЧКА ПАНЕЛИ ВРАЧА




ФИЛЬТРЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АСПИРАЦИИ ДЛЯ КАЖДОГО АСПИРАЦИОННОГО ШЛАНГА




ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДЕЗИНФИЦИРУЕМАЯ И СЪЕМНАЯ


## Встроенные аспирационные системы

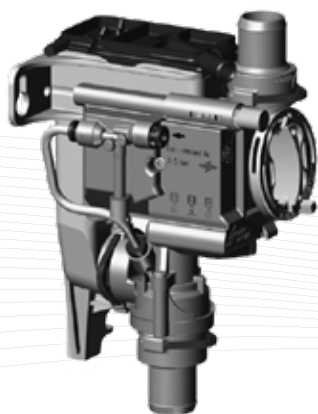

ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН  
ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ  
В АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

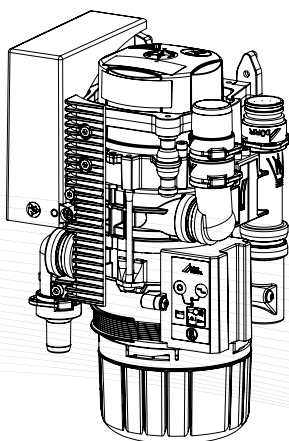

СЕПАРАТОР АМАЛЬГАМЫ

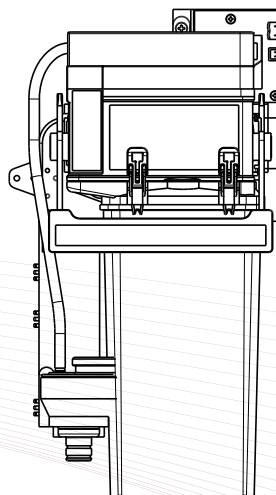

СЕПАРАТОР ВОЗДУХА/ВОДЫ

Стандартно установка подготовлена к влажной системе аспирации. Также есть возможность монтажа встроенных в стоматологическую установку систем для воздушной системы аспирации, а также устройств по утилизации амальгамы, соответствующих действующему законодательству об утилизации амальгамы.

## Амбидекстральный вариант модель NTx



## Вариант хирургической модели с подкатным столиком врача





# Кресло пациента

Кресло оснащено мягкой комфортной бесшовной обивкой из специального материала для медицинского использования, легко чистится и чрезвычайно удобно в использовании. Спинка и сиденье двигаются синхронно, быстро и бесшумно, для обеспечения наибольшего комфорта: во время этого движения они одновременно сдвигаются вперед, оптимизируя доступное рабочее пространство. Во время движения спинка перемещается, чтобы обеспечить сохранение правильного положения пациента и избежать эффекта скольжения плеча по самой спинке. Спинка, доступная в двух вариантах, имеет анатомическую форму с углублениями и выступами, предназначенными для обеспечения комфорта любому пациенту и предотвращения эффекта скольжения и перемещения тела. Также доступна более широкая версия спинки с наполнением из материала с эффектом памяти, что позволяет пациенту удобно расположить руки, что делает ее идеальной для длительного лечения.




СТАНДАРНЫЙ РАЗМЕР СПИНКИ



СПИНКА РАЗМЕРА XL С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

## Регулируемая спинка

В качестве доп. опции также доступна спинка с моторизованным вертикальным перемещением, которой можно управлять с клавиатуры врача, чтобы обеспечить правильное положение головы пациента, будь то **ребенка или взрослого**, на подголовнике.

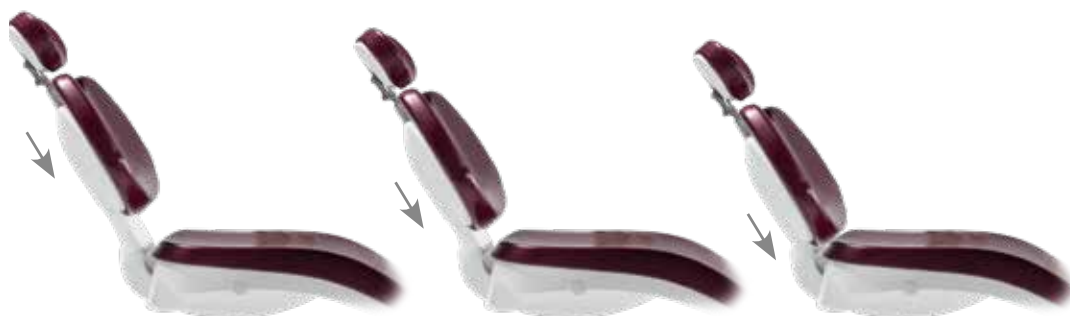

УДЛИННЕННЫЙ ВАРИАНТ

ВАРИАНТ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ


УКОРОЧЕННЫЙ ВАРИАНТ

## Цвета

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ЦВЕТА ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ

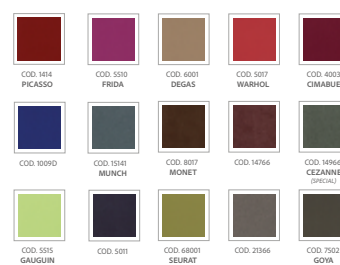

## Педали

Педаль прочная и хорошо сбалансированная, имеет стальное основание, гарантирующее максимальную устойчивость во время работы, исключая скольжение по полу или случайные перемещения, и оснащена практичной выдвижной ручкой для переноса. Педаль доступна в стандартной версии, в версии с Wi-Fi (беспроводная) и в версии с системой push.



ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ВРАЩЕНИЯ  
АМБИДЕКТРАЛЬНОЙ ВЕРСИИ  
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
QR-КОДОМ



**Miglionico S.r.l.**

**Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.**

**70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) ITALY**

**P. Iva: 05306940726**

**Tel +39 080 759552**

**[www.miglionico.net](http://www.miglionico.net)**



**ОТДЕЛ ПО ЭКСПОРТУ**

**И ОБЩИМ ВОПРОСАМ :**

**[export@miglionico.net](mailto:export@miglionico.net)**

**Technical Support:**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

**[service@miglionico.net](mailto:service@miglionico.net)**

**ЛОГИСТИКА:**

**Logistics Department:**

**[logistic@miglionico.net](mailto:logistic@miglionico.net)**

**For any other issue:**

**Иная информация :**

**[info@miglionico.net](mailto:info@miglionico.net)**