





**НАДЕЖНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ,  
АДАПТИРУЕМАЯ К ЛЮБОМУ СТИЛЮ**

**ПРОСТАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, БЛАГОДАРЯ СВОИМ  
ОСОБЕННОСТЯМ, ГАРАНТИРУЮЩАЯ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И МАКСИМАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ.**

## Панель врача



Стоматологическая установка NG отличается регулируемой панелью управления врача с герметизированной стеклянной поверхностью с емкостной сенсорной активацией. Вращающаяся панель управления позволяет наслаждаться возможностью

удобно расположить дисплей, находясь в рабочем положении, как стоя, так и сидя. Управление стоматологической установкой просто и интуитивно понятно: одним прикосновением можно активировать все функции установки и установить

нужные параметры. Панель управления легко дезинфицируется, благодаря защитным функциям блокировки экрана.


## Панель ассистента



Четкие линии с плавным закруглением и удобная эргономичная ручка делают обращение с панелью ассистента чрезвычайно простым. Панель ассистента установлена на двухшарнирном кронштейне и изготовлена из прочного, устойчивого к царапинам и химическому воздействию материала. Панель ассистента оснащена дисплеем управления со стеклянной поверхностью с емкостной сенсорной технологией и рассчитана на размещение двух канюль для хирургической аспирации и двух вспомогательных инструментов.




# Амбидекстральный вариант модель NGx

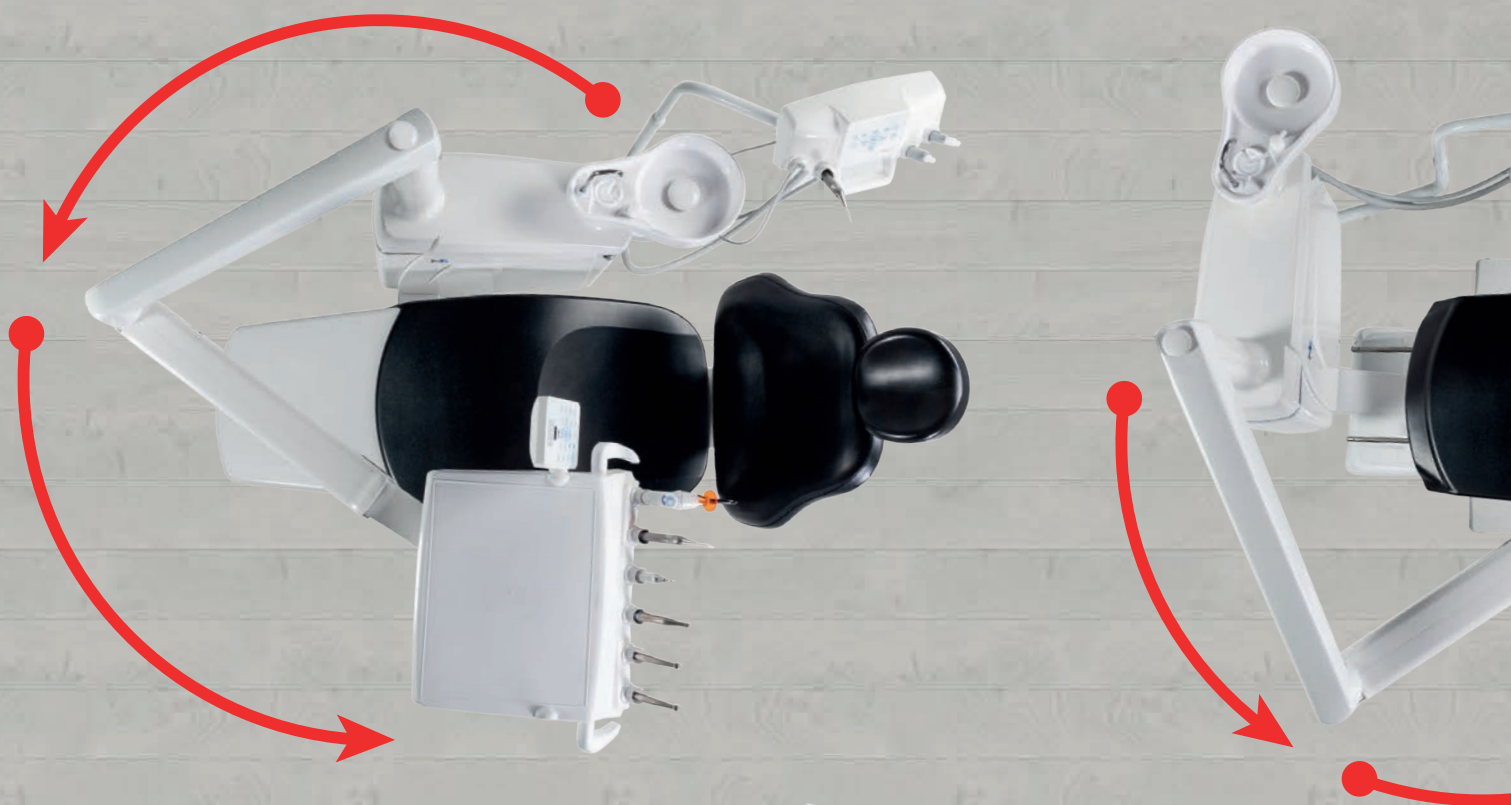


Вариант хирургической модели с подкатным столиком врача

.....



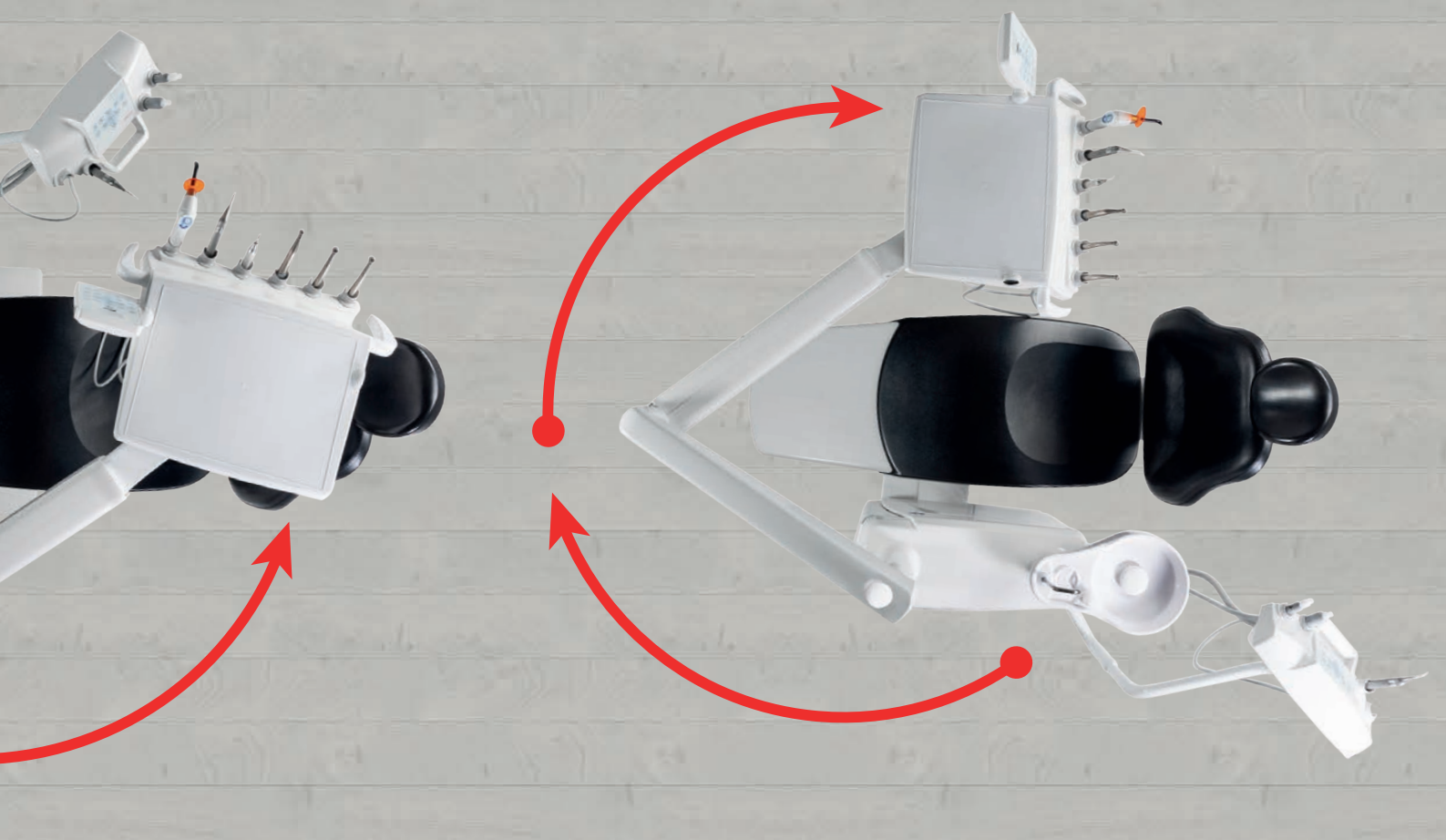

## Регулируемая спинка

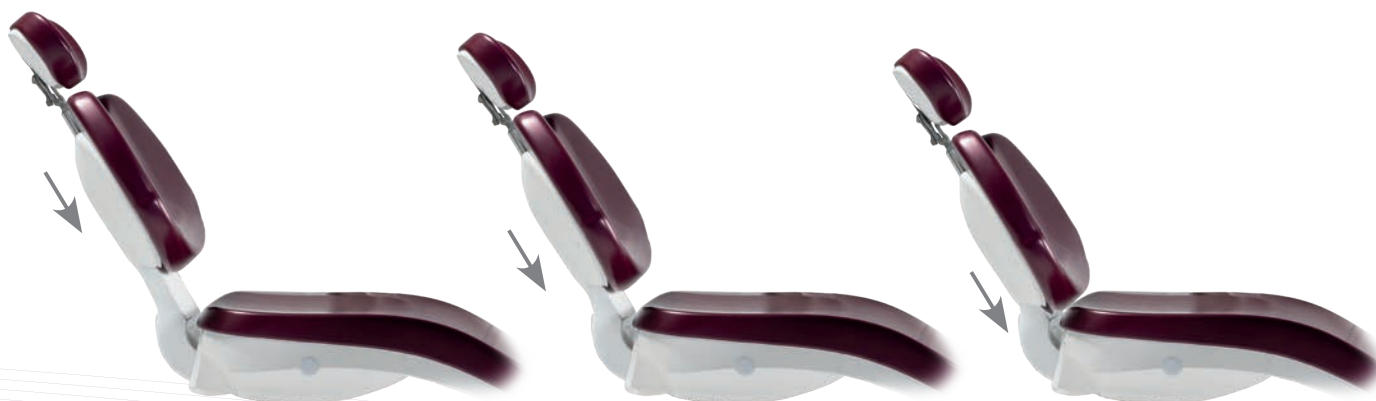

УДЛИНЕННЫЙ ВАРИАНТ

ВАРИАНТ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ

УКОРОЧЕННЫЙ ВАРИАНТ

В качестве доп. опции также доступна спинка с моторизованным вертикальным перемещением, которой можно управлять с клавиатуры врача, чтобы обеспечить правильное положение головы пациента, будь то ребенка или взрослого, на подголовнике.





### СИСТЕМА MDS

НЕПРЕРЫВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ИНТЕНСИВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

### СИСТЕМА MDS:

автоматическая система дезинфекции водяного контура, предназначенная для смешивания водопроводной воды с дезинфицирующей жидкостью. Благодаря MDS вода всегда поступает к наконечникам дезинфицированной, предотвращая образование известкового налета и биопленки, гарантируя чистоту водных коммуникаций и более длительный срок службы наконечников.

### СИСТЕМА MDS+:

в дополнение к базовому функционалу MDS по непрерывной дезинфекции водяных контуров модуля врача, предлагает возможность проведения интенсивной дезинфекции этих же водных коммуникаций и водно-воздушных коммуникаций наконечников, выполняемых между одним пациентом и другим.

## Гигиена



Внутри гидроблока можно установить :

### СИСТЕМА ASB

**БУТЫЛКА ДЛЯ ПОДАЧИ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ** : Система, интегрированная в стоматологическую установку, которая обеспечивает возможность использования дистиллированной воды или воды с добавлением дезинфицирующего средства (WK от компании Metatys) путем забора воды из специальной бутылки емкостью 2 лт. как альтернатива водопроводной воде.



СЪЕМНЫЕ РУЧКИ ПАНЕЛИ ВРАЧА




ХИРУРГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ




СЪЕМНАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА


## Встроенные аспирационные системы

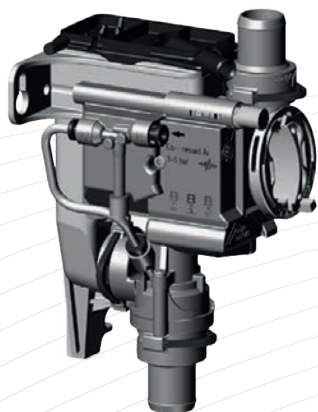

ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН  
ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ  
В АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

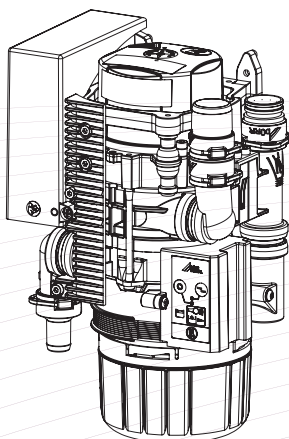

СЕПАРАТОР  
АМАЛЬГАМЫ

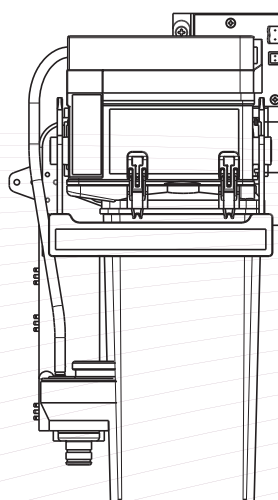

СЕПАРАТОР ВОЗДУХА/  
ВОДЫ

Стандартно установка подготовлена к влажной системе аспирации. Также есть возможность монтажа встроенных в стоматологическую установку систем для воздушной системы аспирации, а также устройств по утилизации амальгамы, соответствующих действующему законодательству об утилизации амальгамы.

# Кресло пациента



СТАНДАРНЫЙ РАЗМЕР СПИНКИ



СПИНКА РАЗМЕРА XL С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

Кресло оснащено мягкой комфортной бесшовной обивкой из специального материала для медицинского использования, легко чистится и чрезвычайно удобно в использовании. Спинка и сиденье двигаются синхронно, быстро и бесшумно,

для обеспечения наибольшего комфорта: во время этого движения они одновременно сдвигаются вперед, оптимизируя доступное рабочее пространство. Во время движения спинка перемещается, чтобы обеспечить сохранение правильного положения пациента

и избежать эффекта скольжения плеча по самой спинке. Спинка, доступная в двух вариантах, имеет анатомическую форму с углублениями и выступами, предназначенными для обеспечения комфорта любому пациенту и предотвращения


эффекта скольжения и перемещения тела. Также доступна более широкая версия спинки с наполнением из материала с эффектом памяти, что позволяет пациенту удобно расположить руки, что делает ее идеальной для длительного лечения.

## Цвета

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ЦВЕТА ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ

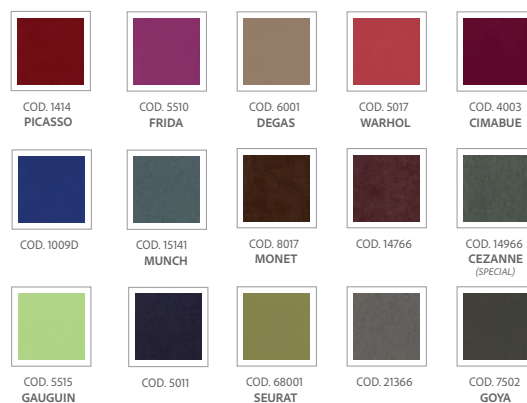

## Педали

Педаль прочная и хорошо сбалансированная, имеет стальное основание, гарантирующее максимальную устойчивость во время работы, исключающее скольжение по полу или случайные перемещения, и оснащена практичной выдвижной ручкой для переноса. Педаль доступна в стандартной версии, в версии с Wi-Fi (беспроводная) и в версии с системой push.



ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ВРАЩЕНИЯ  
АМБИДЕКТРАЛЬНОЙ ВЕРСИИ  
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
QR-КОДОМ



Miglionico S.r.l.

Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.

70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) ITALY

P. Iva: 05306940726

Tel +39 080 759552

[www.miglionico.net](http://www.miglionico.net)



ОТДЕЛ ПО ЭКСПОРТУ  
И ОБЩИМ ВОПРОСАМ :  
[export@miglionico.net](mailto:export@miglionico.net)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:  
[service@miglionico.net](mailto:service@miglionico.net)

ЛОГИСТИКА:  
[logistic@miglionico.net](mailto:logistic@miglionico.net)

Иная информация:  
[info@miglionico.net](mailto:info@miglionico.net)



Language