

# Siger u500





Компания **Siger Medical** была основана в 2005 году в Чжухае, провинция Гуандун (Китай). Уже в 2007 году вышла первая флагманская серия стоматологических установок «S», которая быстро получила международное признание. Сегодня продукция Siger используется более чем в **100 странах** мира, а **годовой объем продаж одной линейки достигает 10 000 установок**.

Гарантия на установки для Joseph – 3 года + поддержка denti service

### УТП:

- 1) **Широкий ассортимент** профессионального оборудования (V,S,U серии стом. установок). Помимо стом. кресел Siger выпускает рентген-аппараты (Siger Neo), стерилизаторы, компрессоры, аспирационные системы и др.
- 2) **Баланс цена-качество:** Siger позиционируется как бренд, предлагающий профессиональный уровень оборудования при более доступной цене, чем многие европейские аналоги.  
V-серия (эконом/базовый сегмент). Установки v6000, v1000  
S-серия (пред премиальный сегмент/коммерческий сегмент/upper middle). Установка s30  
U-серия (премиум сегмент). Установка u200, u500
- 3) **Эргономика и комфорт:** установки и оборудование разработаны с упором на удобство работы стоматолога и комфорт пациента — от эргономичных кресел до интуитивного управления и модульной архитектуры.



# Позиционирование линеек Siger



## V-серия

доступная цена + базовая функциональность

Характеристики:

- Минимально необходимый функционал
- Простая эргономика

Как подавать клиентам: эконом-класс. Надёжная база без избыточных опций



## S-серия

коммерческий сегмент

Характеристики:

- Существенно лучше эргономика
- Премиальная S-обивка

Расширенные опции:

- сенсорное управление
- память положений

Как подавать клиентам: upper-middle сегмент. Высокий уровень возможностей за разумные деньги



## U-серия

флагманские решения Siger

Характеристики:

- Максимальная эргономика
- Продвинутое сценарии работы

Фокус на:

- комфорт врача
- статус клиники

Как подавать клиентам: конкурирует не по бренду, а по оснащению с европейскими премиум-установками

# Стандартная комплектация u500

Стоматологическое пациентское кресло с итальянской обивкой S-code. Основание кресла выполнено из литого алюминия

## • **Версия: для правшей и левшей**

Блок врача с поворотной консолью (6 слотов)

- Шланг для турбинных наконечников, четырехканальные (1 шланг 4-канальный)
- Шланг для турбинного наколечника с оптоволоконном (F.O.) (1 шланг 6-канальный с оптикой)
- Микро мотор Siger E1
- Встроенный скалер Siger N3000 (эндо, скейлинг, перियो) + набор на подключения
- Трёхфункциональный пистолет (вода-воздух) (со стороны врача)

Блок ассистента с поворотной консолью (4 слота):

- Съёмная керамическая плевательница (автоматическое наполнение и смыв чаши)
- Набор для подключения подогревателя воды для стаканчика
- Трёхфункциональный пистолет (вода-воздух)

## **Дополнительные элементы:**

- Полимеризационная лампа Siger Q6
- **Операционный LED-светильник V5 с сенсорным управлением**
- Пневматическая система инъекции
- **Поворотный механизм**
- Система дистиллированной воды
- **Улучшенный подголовник с кнопочной фиксацией**
- Многофункциональная педаль управления (педального типа)
- Стоматологический стул Siger
- **Улучшенная обивка: прошитая (супермягкий тип)**
- **Правый подлокотник**
- **Улучшенный вращающийся держатель инструментов на блоке ассистента**


## **Сохо:**

- турбинный наконечник СОХО CX207F
- угловой наконечник СОХО CX235C1

## ПОДРОБНЕЕ ПРО ДОП. ЭЛЕМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА U500



180° вращение стола  
врача и ассистента

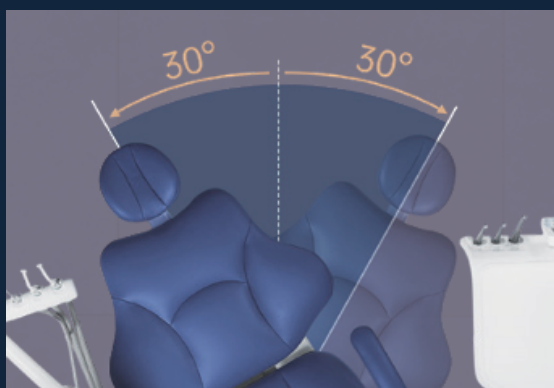

30° вращение  
поворотного  
механизма




Цифровое  
управление  
положением кресла  
под нужды врачей



Углы поворота стола  
врача



Гибкая  
конфигурация,  
плавное вращение  
под разными углами

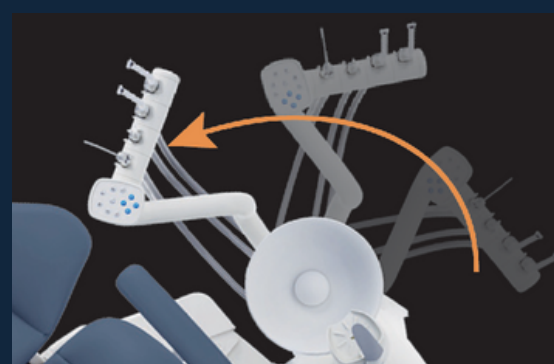


Улучшенное  
вращение стола  
ассистента



Улучшенный  
подголовник с  
кнопочной  
фиксацией



S-code обивка  
(обновление до  
супер-мягкого типа)

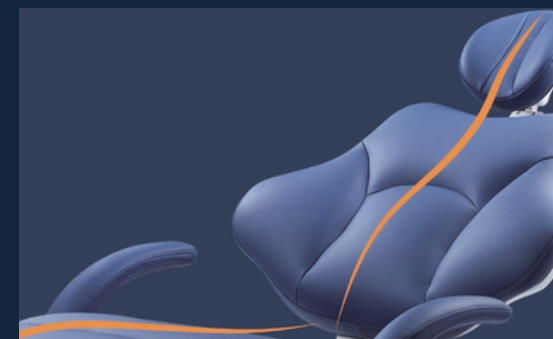

Эргономичный  
контур кресла,  
Увеличенное  
пространство для ног  
врача и ассистента



Контроль  
температуры воды



Верхняя заливка  
дистиллированной  
воды



Съемные фильтры  
аспирации

# S-code обивка с силиконовым покрытием





# Амбидекстерная система – за счет чего?

Поворот элемента врача на  $180^\circ$ , а также движение стола ассистента

Сбалансированный дополнительный угол ( $\approx 30^\circ$ )

**При смене стороны:**

- 1) сохраняется эргономика подачи инструментов
- 2) не нарушается рабочий треугольник врач–ассистент–пациент



# V5 LED (освещение)

- Бесступенчатая регулировка яркости
- Низкое тепловыделение
- **CRI  $\geq$  90 (90 и выше  $\rightarrow$  очень высокая точность цветов), равномерный свет без теней**
- Трёхосевое вращение
- Сенсорное включение
- Долгий срок службы
- Тип включения – бесконтактный



## Ссылка на видео и500

(<https://www.youtube.com/watch?v=qJ7VVnXdrGs&t=93s>)

# На что обратить внимание? (опции)

Аспирационная система – это оборудование, которое отсасывает жидкости, слюну, кровь, аэрозоли и мелкие частицы из полости рта пациента во время лечения.

Когда особенно важно обратить внимание на выбор системы

- если в клинике 2 и более установок
- при высокой проходимости пациентов
- при работе с хирургией, ортопедией, терапией
- если важен низкий уровень шума

Подсоединяются с помощью клапанов, которые докупаются отдельно (125 000 тнг - за 1шт)

## Аспирационная система Siger

### Основные преимущества:

- Эффективное отделение сточных вод – надежная работа системы водоотделения.
- Двухступенчатое разделение воздуха и воды – дополнительная безопасность при работе.
- Автоматическая система старт-стоп – реагирует на включение и выключение стоматологических установок.
- Обнаружение стоматологической установки – автоматический старт и остановка.
- Двойные моторы – для вакуумного насоса и дренажа.
- Низкий уровень шума – комфортная работа в клинике.



МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОК	МОЩНОСТЬ (W)	МАКС. РАСХОД ГАЗА (ЛИТРОВ В МИНУТУ)	ЦЕНА ПРОДАЖНАЯ (ТНГ)
VC10	1	500	300	480 000
VC20	2	700	600	550 000
VC30	2-4	1100	1200	650 000
VC30+	2-4	550	1200	960 000
VC60+	4-6	1000	1500	1 250 000
VC80+	6-8	2000	2000	1 530 000

# На что обратить внимание? (опции)

## Хирургический светильник L500

- Освещённость: 33 000 – 130 000 Lux
- 3 уровня цветовой температуры
- 36 LED с высоким CRI
- Чёткое, равномерное, без теней
- Вращающаяся ручка
- Возможность потолочного монтажа

Цена: 810 900 тенге



# Конкуренты?

Конкурентами Siger (в зависимости от сегмента) являются бренды: Osstem, Ajax, Runyes, Mercury, Cingol, Silverfox.

Все, кроме Osstem являются китайскими брендами.

## Чем Siger лучше конкурентов?

- Ниже цена, чем у Osstem и Good Doctors при сопоставимых характеристиках
- Более современный функционал, чем у бюджетных ARIA / Hico / Mercury
- Выше ценность, чем у аналогичных китайских OEM-брендов

## Как объяснить клиенту?

Вы получаете рабочую установку с высоким уровнем автоматизации и цифровым управлением, но без переплаты за бренд-премиум. +3 года гарантии, поддержка Denti Serice, ассортимент из трех типов сегмента

